



**SPHERIC<sup>®</sup>**

---


Acetábulo Bipolar



**AMPLITUDE<sup>®</sup>**





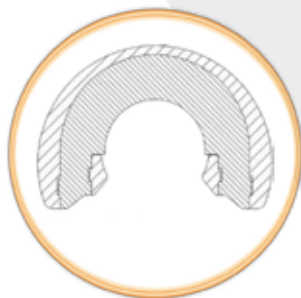







- Anel com trava para cabeça femoral;
- Superfície exterior em aço inoxidável altamente polido;
- Inseto de polietileno pré-montado;
- Instrumental disponível para determinar o tamanho do implante.



- Retenção da cabeça femoral assegurada pelo anel de retenção modular;
- Anel de retenção é inserido com pinça;
- O chanfro na borda de retenção retarda o contato com o colo da haste femoral, permitindo maior amplitude de movimento da haste femoral no acetábulo e ajuda a reduzir o desgaste do polietileno;
- Inseto para cabeças femorais de Ø22.2mm e Ø28mm.

**SPHERIC®:** Acetábulo Bipolar Ø40mm a Ø58mm em incrementos de tamanho de 2mm.

	Ø40mm	Ø42mm	Ø44mm	Ø46mm	Ø48mm	Ø50mm	Ø52mm	Ø54mm	Ø56mm	Ø58mm
Inseto Ø22.2mm										
Inseto Ø28mm										

## IMPLANTES

	Cabeça Femoral Ø22mm	Cabeça Femoral Ø28mm
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 40/22	1-0102540	-
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 42/22	1-0102542	-
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 44/22	1-0102544	-
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 46/22	1-0102546	-
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 48/28	-	1-0102648
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 50/28	-	1-0102650
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 52/28	-	1-0102652
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 54/28	-	1-0102654
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 56/28	-	1-0102656
Acetábulo Bipolar SPHERIC® 58/28	-	1-0102658

**Amplitude Latin América S.A**  
 Av. 80-A, 599 - Jardim Village  
 13506-095 - Rio Claro/SP - Brasil  
 Tel. : +55 (19) 3522-2380  
 E-mail : administrativo@amplitude-latam.com

[www.amplitude-ortho.com](http://www.amplitude-ortho.com)